

Kits und Zubehör

kits and accessories | kits et accessoires | kits y accesorios



Kit Auswahl 144

- EN Kits assortment
- FR Sélection des kits
- ES Selección de kits

Umfassende Sets

- EN Comprehensive sets
- FR Ensembles complets
- ES Conjuntos completos

1432 «ALL YOU NEED» CAD-CAM KIT	145
1372 JOTA CONSERVATION/COMPOSITE KIT	146
1391 COMPOSITE UNIVERSAL KIT	146
1474 PREPARACIONES DENTARIAS acc. Dr. Victor Guerrero	147
1945 MASTER KIT ROA acc. Dr. Roberto Tello	147

Präparation

- EN Preparation
- FR Préparation
- ES Preparación

1325 OKKLUSAL PREP KIT	148
1411 CHAMFER CLASSIC KIT acc. Dr. Bartling	148
1418 CROWN PREP CONVENTIONAL KIT	149
1424 UNIVERSAL PREP KIT acc. Prof. Dr. Brägger	149
1431 UNIVERSAL ALL CERAMIC KIT acc. Prof. Dr. Brägger	150
1724 ALL CERAMIC PREPARATION acc. Dr. Milko Villarroel	150
1730 CERAMIC PREP UPDATE acc. Dr. Milko Villarroel	151

Veneertechnik

- EN Veneering
- FR Facettes
- ES Carillas

1443 JOTA EFFICIENT VENEER PREP KIT	151
1449 JOTA ESTHETIC VENEER PREP KIT	152

Füllungsbearbeitung

- EN Filling processing
- FR Usinage de remplissage
- ES Procesamiento del llenado

1326 DIAMOND COMPOSITE FINISHING KIT	152
1327 CARBIDE COMPOSITE FINISHING KIT	153
1396 FINISHING STONE KIT	153
1921 PROFESSIONAL POLISHING COMPOSITE	154
1939 EXTENDED POLISHING COMPOSITE KIT	154
1393 DIAMOND POLISHER KIT „JOTA EASY“	155
1394 DIAMOND POLISHER KIT „JOTA PROFESSIONAL“	155
1899 SILICON POLISHERS FOR COMPOSITES KIT	156

Chairside Keramikbearbeitung

- EN Chairside ceramic processing
- FR Traitement de la céramique au fauteuil
- ES Tratamiento de la cerámica en la consulta

1439 NANO CERAMIC CHAIRSIDE POLISHING KIT	156
1395 SILICON POLISHER KIT FOR CERAMIC	157
1399 POLISHER KIT „3-STEP“ FOR CERAMIC	157
1435 JOTA LS GLOSS KIT	158
1440 LS GLOSS CHAIRSIDE KIT	158
1460 ZIR-PREP KIT	159
1436 ZIR GLOSS KIT	159
1441 ZIR GLOSS CHAIRSIDE KIT	160
1453 LS-ZIR POLISHING CHAIRSIDE KIT	160

Kieferorthopädie

- EN Orthodontic
- FR Orthodontie
- ES Ortodoncia

1389 ORTHODONTIC KIT FG	161
1390 ORTHODONTIC RA KIT	161

Sonstige Sets

- EN Other Sets
- FR Autres ensembles
- ES Otros conjuntos

1367 MINIMAL PREPARATION KIT	162
1331 KIDS TREATMENT SET	162
1330 ENDO ACCESS KIT	163
1999 ALL CROWN CUTTER KIT	163
1771 JOTA PARADONTAL KIT	164
1912 PERIIMPLANTITIS acc. PD Dr. Philipp Sahrman	164
1454 DEGRANULATION KIT	165

Provisorische Restaurationen

- EN Temporary restorations
- FR Restaurations temporaires
- ES Restauraciones

1833 KIT B.E.F acc. Dr. Milko Villarroel	166
1840 PROVISIONAL ADJUSTMENT AND POLISHING	166

Bohrerstände**167**

- EN Bur blocks
- FR Manches
- ES Freseros

KITS AUSWAHL

KITS ASSORTMENT



1325	1326	1327	1330	1331	1367	1372
P. 148	P. 152	P. 153	P. 163	P. 162	P. 162	P. 146



1389	1390	1391	1393	1394	1395	1396
P. 161	P. 161	P. 146	P. 155	P. 154	P. 157	P. 153



1399	1411	1418	1424	1431	1432	1435
P. 157	P. 148	P. 149	P. 149	P. 150	P. 145	P. 158



1436	1439	1440	1441	1443	1449	1453
P. 159	P. 156	P. 158	P. 160	P. 151	P. 152	P. 160



1454	1460	1474	1724	1730	1771	1833
P. 165	P. 158	P. 147	P. 150	P. 151	P. 164	P. 166



1840	1899	1912	1921	1939	1945	1999
P. 166	P. 156	P. 164	P. 154	P. 154	P. 147	P. 163

UMFASSENDE SETS

COMPREHENSIVE SETS



Kit 1432

«ALL YOU NEED» CAD-CAM



Das KIT 1432 enthält Instrumente für die präzise Präparation von Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen und Kronen sowie Instrumente zur Charakterisierung und Politur von Chairside-Keramik-Restaurationen, einschließlich Zirkonoxid, Emax®, IPS Empress® oder Hybridkeramik-Restaurationen. Erleben Sie mit diesem Kit eine deutliche Erleichterung und Zeitersparnis in Ihrer täglichen Arbeit. Mit einem einzigen Set an Instrumenten decken Sie das gesamte Spektrum an CAD-CAM-Materialien und den gesamten digitalen Workflow ab: Tiefenmarkierung - Präparation - Restaurationen separieren- Beschleifen der Kontaktpunkte - Restaurationen polieren- Suprakontakte Verschleifen – intraorale Politur der Restauration.

KIT 1432 contains burs for the precise preparation of inlays, onlays, veneers, partial crowns and crowns, and instruments for characterizing and polishing chairside ceramic restorations, including zirconia, Emax®, IPS Empress® or hybrid ceramic restorations. Experience significant relief and time savings in your daily work with this kit. With a single set of instruments, you cover the entire spectrum of CAD-CAM materials and the entire digital workflow: depth marking - preparation - polishing - separating restorations - polishing restorations - grinding supra-contacts - intraoral polishing of the restorations.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	839	FG	806 314 150 524	014	1
	801	FG	806 314 001 524	018	1
	801	FG	806 314 001 524	023	1
	834	FG	806 314 552 524	021	1
	849	FG	806 314 197 524	025	1
	850	FG	806 314 198 524	012	1
	850	FG	806 314 198 524	018	1
	850	FG	806 314 198 524	021	1
	845R	FG	806 314 544 524	025	1
	833F	FGL	806 315 277 514	023	1
	849F	FG	806 314 197 514	025	1
	850F	FG	806 314 198 514	018	1
	850F	FG	806 314 198 514	021	1
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	845RF	FG	806 314 544 514	025	1
	828TG	FGS	806313501524015	017	1
	828TY	FGS	806313501524020	017	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	GP662	RA	655 204 288 526	035	1
	SD661F	RA	805 204 288 514	025	1
	6198.ARK	RA	635 204 198 505	023	1
	ZIR9863M	RA	803 204 543 521	140	1
	ZIR9863F	RA	803 204 543 511	140	1
	9837	RA	803 204 543 503	140	1



Kit 1372

JOTA CONSERVATION/ COMPOSITE




Das CONSERVATION/ COMPOSITE Kit enthält ausgewählte Instrumente zur Präparation verschiedener Kavitätenklassen, sowie Instrumente zur Entfernung von aufgeweichtem Dentin. Darüber hinaus enthält das Kit Instrumente zum effizienten Finieren und Polieren von Kompositrestaurationen.

The Composite Kit contains selected instruments for the preparation of various cavity classes, as well as instruments for the removal of softened dentin. In addition, the kit contains instruments for efficient finishing and polishing of composite restorations.

Kit 1391

COMPOSITE UNIVERSAL

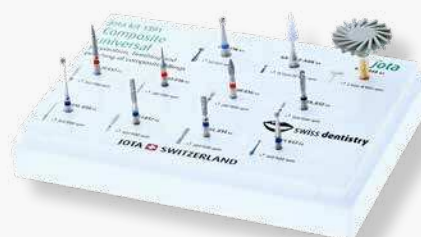

Das Kit enthält neben den wichtigsten Instrumenten für die präzise Präparation verschiedenster Kavitäten auch Instrumente zur Entfernung von Amalgam- und Kompositfüllungen und erweichter, kariöser Zahnschubstanz. Feinkörnige Diamantinstrumente und ein Arkansas Stein unterstützen das Konturieren und Finieren der Kompositfüllungen. In einem abschliessenden Arbeitsschritt werden mit Hilfe eines Diamantpolierers die Restaurationen auf Hochglanz poliert.

In addition to the essential instruments for the precise preparation of a wide variety of cavities, the kit also contains instruments for removing amalgam and composite fillings and softened carious tooth substances. Fine-grained diamond instruments and an Arkansas stone support the contouring and finishing of composite fillings. In a final step, a diamond polisher is used to polish the restorations to a high gloss.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	008	1
	801	FG	806 314 001 524	012	1
	808RL	FG	806 314 238 524	012	1
	808RL	FG	806 314 238 524	014	1
	862F	FG	806 314 249 514	010	1
	862F	FG	806 314 249 514	016	1
	801F	FG	806 314 001 514	023	1
	830F	FG	806 314 257 514	021	1
	C1	RA	500 204 001 001	012	1
	C1	RA	500 204 001 001	014	1
	C1	RA	500 204 001 001	016	1
	C1	RA	500 204 001 001	018	1
	9831	RA	803 204 243 502	030	1
	9832	RA	803 204 030 502	060	1
	9833	RA	803 204 304 502	100	1
	9834	RA	803 204 243 502	040	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	012	1
	808L	FG	806 314 234 524	014	1
	837	FG	806 314 110 524	012	1
	801L	FG	806 314 697 524	014	1
	CQ1	RA	500 204 001 002	016	1
	862F	FG	806 314 249 514	012	1
	820F	FG	806 314 465 514	016	1
	830F	FG	806 314 257 514	016	1
	C31A	FG	500 314 139 008	012	1
	645.ARK	RA	635 204 161 505	028	1
	9837	RA	803 204 543 503	140	1

NEW
PRODUCT**Kit 1474****PREPARACIONES DENTARIAS**

by Dr. Victor Guerrero



Dieses von Dr. Victor Guerrero entwickelte Kit ermöglicht die Durchführung zahnärztlicher Präparationen unter optimalem Einsatz des Absoluten Isolierens. Es enthält eine kompakte Auswahl an Instrumenten, mit denen der klinische Anwender auf einfache und vorhersehbare Weise verschiedene Präparationsdesigns für indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays, Overlays, Vonlays, Okklusale Veneers sowie Vertipreps für den Ersatz von Kronen durchführen kann.

This kit, designed by Dr. Victor Guerrero to perform dental preparations utilizing the advantages of Absolute Isolation, includes a compact selection of instruments that allow the clinician to easily and predictably perform various preparation designs for indirect restorations, such as inlays, onlays, overlays, vonlays, occlusal veneers, and also Verti preps for crown replacements.

NEW
PRODUCT**Kit 1945****MASTER KIT ROA**

by Dr. Roberto Tello



Das neue MÁSTER KIT ROA, entwickelt von Dr. Roberto Tello, ist das umfangreichste Kit für die adhäsive restaurative Zahnmedizin. Es vereint Schweizer Präzision mit höchster Effizienz für minimalinvasive Präparationen. Ideal für kontaktlinsenartige Veneers, voluminöse Veneers und Vonlays, ermöglicht es präzise und effiziente Präparationen von Restaurationen und vertikalen Präparationstechniken. Das Set enthält speziell entwickelte Diamantinstrumente für die Dentinversiegelung, wodurch die finale Adhäsion optimiert wird.

The new MÁSTER KIT ROA, developed by Dr. Roberto Tello, is the most comprehensive kit for adhesive restorative dentistry. It combines Swiss precision with maximum efficiency for minimally invasive preparations. Ideal for contact lens-like veneers, high-volume veneers, and vonlays, it enables precise and efficient preparation of restorations and vertical preparation techniques.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	C44E	FG	500 314 499 072	014	1
	845R	FG	806 314 544 524	021	1
	839	FG	806 314 150 524	012	1
	833F	FG	806 314 277 514	014	1
	833F	FG	806 314 277 514	018	1
	859F	FG	806 314 166 514	012	1
	845RF	FG	806 314 544 514	025	1
	850F	FG	806 314 198 514	014	1
	881F	FG	806 314 141 514	010	1
	881F	FG	806 314 141 514	014	1
	862F	FG	806 314 249 514	010	1
	862F	FG	80 6314 249 514	012	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	6198.ARK	FG	635 314 198 505	023	1
	859LEF	FG	806 314 167 504	014	1
	890LEF	FG	806 314 699 504	008	1
	893HEF	FG	806 314 707 504	023	1
	446KR	FG	806 314 546 524	008	2
	815	FG	806 314 042 524	023	1
	837L	FG	806 314 111 524	010	1
	859L	FG	806 314 167 524	012	1
	881	FG	806 314 141 524	010	1
	845R	FG	806 314 544 524	018	1
	852F	FG	806 314 199 514	010	1
	852F	FG	806 314 199 514	010	1
	846KRF	FG	806 314 562 514	018	1
	890F	FG	806 314 160 514	010	1
	820F	FG	806 314 465 514	016	1
	863F	FG	806 314 250 514	012	1
	846KRF	FG	806 314 562 514	021	1
	893F	FG	806 314 507 514	023	1
	859LF	FG	806 314 167 514	010	1
	839KF	FG	806 314 722 514	012	1
	859LF	FG	806 314 167 514	010	1
	881F	FG	806 314 141 514	010	1

PRÄPARATION

PREPARATION

Kit 1325

OKKLUSAL PREP



Das Kit enthält Diamantinstrumente für das Präparieren und Finieren von okklusalen Oberflächen. Dank besonderen anatomischen Formen der Arbeitsteile, sind keine unterschiedlichen Bearbeitungsrichtungen notwendig, um die Okklusal-Fläche eines Zahnes zu präparieren. Somit wird die Bearbeitungszeit deutlich optimiert.

The kit contains diamond instruments for preparing and finishing occlusal surfaces. Thanks to special anatomical shapes of the working parts, no different processing directions are necessary to prepare the occlusal surface of a tooth. This significantly optimizes the processing time.

Kit 1411

CHAMFER CLASSIC

acc. Dr. Bartling



Das CHAMFER CLASSIC Kit beinhaltet ein optimal abgestimmtes Sortiment von Diamanten zur Hohlkehlpriparation und Finieren. Gerade im Bereich der Vollkeramik leistet die Präparation einen wichtigen Beitrag zur Stabilität von Kronen und Brücken. Ein systematisches Vorgehen bei Präparation erleichtert das Erreichen von sehr guten klinischen Resultaten.

The CHAMFER CLASSIC Kit contains an optimally coordinated assortment of diamonds for chamfer preparation and finishing. Especially in all-ceramics, the preparation makes an essential contribution to the stability of crowns and bridges. A systematic preparation procedure facilitates the achievement of excellent clinical results.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	525	FG	806 314 525 524	017	1
	526	FG	806 314 526 524	023	1
	525EF	FG	806 314 525 504	017	1
	526EF	FG	806 314 526 504	023	1
	893HEF	FG	806 314 707 504	023	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	526	FG	806 314 526 524	023	1
	801	FG	806 314 001 524	018	1
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	862	FG	806 314 249 524	012	1
	881	FG	806 314 141 524	012	1
	881	FG	806 314 141 524	014	1
	525F	FG	806 314 525 514	012	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	881F	FG	806 314 141 514	014	1

Kit 1418**CROWN PREP CONVENTIONAL**

Dieses Präparationsset enthält alle Instrumente, die für die Kronenpräparation erforderlich sind. Die Hohlkehlen und Stufenpräparationen für Vollkeramikversorgungen können durchgeführt werden. Der geplante Abtrag wird über Tiefenmarkierungen vordefiniert und eine optimale Materialstärke für die Versorgung ist sichergestellt. Eine Besonderheit des Sets ist das Instrument mit einem axial verlaufenden Führungsstift, das die Kontrolle der Präparationstiefe und die Schaffung einer idealen Randgeometrie für Kleberrestaurationen ermöglicht.

This preparation set contains all instruments required for crown preparation. The chamfers and shoulder preparations for all-ceramic restorations can be carried out. The planned preparation is predefined via depth markings, and an optimum material thickness for the restoration is ensured. A unique feature is an instrument with an axially running guide pin, which controls the preparation depth and ideal marginal geometry for adhesive restorations to be created.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	859	FG	806 314 166 524	014	1
	882	FG	806 314 142 524	016	1
	508F	FG	806 314 508 514	020	1
	878F	FG	806 314 298 514	016	1
	882F	FG	806 314 142 514	014	1
	508G	FG	806 314 508 534	020	1

Kit 1424**UNIVERSAL PREP**

acc. Prof. Dr. Brägger, University Bern




Das Universal Prep Kit beinhaltet ein optimal abgestimmtes Sortiment von Diamanten für Präparationen im gesamten Indikationsbereich der Kronen- und Brückenprothetik. Ein Kit für alle Präparationen mit verminderter Konvergenz, zur substanzschonenden Reduktion und definierter Präparationsgrenze für VMK-Kronen mit aufgebrannter Schulter sowie für vollkeramische CAD/CAM-Restaurationen.

The Universal Prep Kit contains an optimally coordinated assortment of diamonds for preparations in the entire indication range of crown and bridge prosthetics. A kit for all preparations with reduced convergence, for substance-preserving reduction, and defined preparation margins for porcelain-fused-to-metal crowns with a burnt-on shoulder as well as for all-ceramic CAD/CAM restorations.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	558	FG	806 314 558 524	013	1
	558	FG	806 314 558 524	015	1
	833	FGL	806 315 277 524	023	1
	859L	FG	806 314 167 524	012	1
	558F	FG	806 314 558 514	013	1
	558F	FG	806 314 558 514	015	1
	833F	FGL	806 315 277 514	023	1
	893F	FG	806 314 507 514	023	1

Kit 1431**UNIVERSAL ALL CERAMIC**

acc. to Prof. Dr. Brägger, Universität Bern

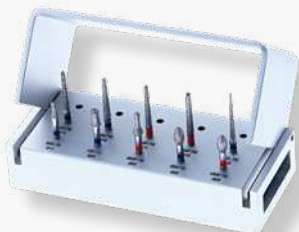


Das Universal All Ceramic Kit wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Brägger entwickelt und eignet sich optimal für die Schulterpräparation für Restaurationen aus Keramik. Das Kit enthält aufeinander abgestimmte Diamantinstrumente für eine optimale Gestaltung der Schulter und der okklusalen Oberfläche.

The Universal All Ceramic Kit was developed in cooperation with Prof. Dr. Brägger and is ideally suited for shoulder preparation for ceramic restorations. The kit contains coordinated diamond instruments for optimal shaping of the shoulder and the occlusal surface.

Kit 1724**ALL CERAMIC PREPARATION**

acc. to Dr. Milko Villarreal

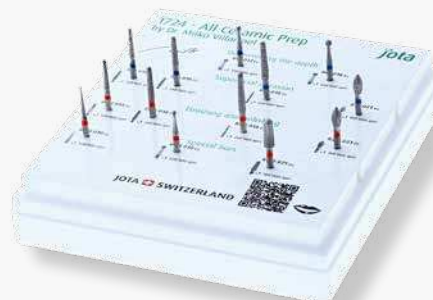

Dieses Kit wurde unter Berücksichtigung höchster ästhetischer Ansprüche gemeinsam mit dem bekannten Opinion Leader Dr. Milko Villarreal entwickelt. Das Kit enthält eine detaillierte Abfolge von Qualitätsinstrumenten für Präzisionsarbeiten, die den einzelnen Schritten des Verfahrens zur Herstellung von Kronen und Keramiklaminate entsprechen.

This kit was developed with the highest aesthetic demands in mind, together with the well-known opinion leader Dr. Milko Villarreal. The kit contains a detailed sequence of quality instruments for precision work corresponding to each step of the crown and ceramic laminate procedure.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	525	FG	806 314 525 524	017	1
	526	FG	806 314 526 524	023	1
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	852	FG	806 314 199 524	014	1
	852	FG	806 314 199 524	016	1
	859L	FG	806 314 167 524	012	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	852F	FG	806 314 199 514	014	1
	852F	FG	806 314 199 514	016	1
	893F	FG	806 314 507 514	023	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	012	1
	801	FG	806 314 001 524	016	1
	830	FG	806 314 257 524	023	1
	850	FG	806 314 198 524	014	1
	850	FG	806 314 198 524	016	1
	852	FG	806 314 199 524	018	1
	801F	FG	806 314 001 514	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	023	1
	849F	FG	806 314 197 514	025	1
	850F	FG	806 314 198 514	014	1
	850F	FG	806 314 198 514	016	1
	852F	FG	806 314 199 514	018	1
	858F	FG	806 314 165 514	010	1

VENEERTECHNIK

Veneering



Kit 1730

ALL CERAMIC PREP UPDATE

acc. to Dr. Milko Villarroel




Das Kit 1730 ermöglicht es allen Zahnärzten, Präparationen nach einem rationalen und zuverlässigen Protokoll durchzuführen. Blaue Diamantbohrer mittlerer Körnung werden zur Tiefenmarkierung, zum Materialabtrag und zur Eliminierung approximaler Bereiche eingesetzt. Feine rote Diamantbohrer werden für die Feinbearbeitung aller Oberflächen und für biologischeorientierte Präparationstechniken empfohlen.

The kit 1730 enables all dental professionals to carry out dental preparations based on a rational and sound protocol. Medium grit blue diamond burs are selected to mark depth, remove material and eliminate proximal areas. Fine red diamond burs are recommended for finishing all surfaces and for biology-oriented preparation techniques.

Kit 1443

JOTA EFFICIENT VENEER PREP

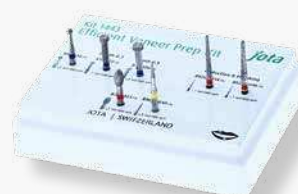

Dieses Kit beinhaltet alle Instrumente für eine effiziente Veneer-Präparation. Mit dem Tiefenmarkierer 815 FG.022 wird eine 0.3 mm tiefe Rille im zervikalen Drittel der Labialfläche angelegt. Mit dem Tiefenmarkierer 815 FG.026 wird eine 0.5 mm tiefe Rille im inzisalen Drittel der Vestibulärfläche angelegt. Das Kit enthält ein Diamantinstrument mit zwei unterschiedlichen Körnungen, was dem Zahnarzt erlaubt, in einem Arbeitsschritt den gingivalen Präparationsrand zu finieren und labial den markierten Schmelzanteil zu entfernen. Ein Instrumentenwechsel ist nicht mehr erforderlich.

This kit contains all instruments for efficient veneer preparation. The depth marker 815 FG.022 is used to create a 0.3 mm deep groove in the cervical third of the labial surface. The depth marker 815 FG.026 is used to create a 0.5 mm deep groove in the incisal third of the vestibular surface. The kit contains a diamond instrument with two different grit sizes, which allows the dentist to finish the gingival preparation margin and remove the marked enamel portion labially in one step. It is no longer necessary to change instruments.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	012	1
	801	FG	806 314 001 524	016	1
	850	FG	806 314 198 524	012	1
	859	FG	806 314 166 524	010	1
	852	FG	806 314 199 524	012	1
	801F	FG	806 314 001 514	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	018	1
	830F	FG	806 314 257 514	023	1
	845RF	FG	806 314 544 514	025	1
	850F	FG	806 314 198 514	012	1
	852F	FG	806 314 199 514	012	1
	863F	FG	806 314 250 514	012	1
	890F	FG	806 314 160 514	010	1
	526F	FG	806 314 526 514	023	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	014	1
	815	FG	806 314 042 524	022	1
	815	FG	806 314 042 524	026	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	852GF	FG	856 314 199 534	014	1
	852GF	FG	856 314 199 534	016	1
	890EF	FG	806 314 160 504	010	1

FÜLLUNGSBEARBEITUNG

FILLING FINISHING



Kit 1449

JOTA ESTHETIC VENEER PREP



Eine Auswahl an Instrumenten für anatomisch angepasste Veneer-Präparationen. Der Tiefenmarkierer 834 unterstützt die Präparation einer korrekt definierten Stärke des Veneers auf der Labialfläche des jeweiligen Zahnes. Diamanten der Form 852 unterstützen den schnellen Zahnschmelzabtrag. Der Arkansas-Stein 649 erlaubt das perfekte Finieren der Präparation und insbesondere das Glätten des Zahnschmelzprismen.

A selection of instruments for anatomically adapted veneer preparations. The depth marker 834 supports the preparation of a correctly defined thickness of the veneer on the labial surface of the respective tooth. Shape 852 diamonds support rapid enamel removal. The Arkansas stone 649 allows perfect finishing of the preparation and especially smoothing of the enamel prisms.

Kit 1326

DIAMOND COMPOSITE FINISHING



Play video

Das Kit 1326 enthält feine und extrafeine Diamantinstrumente für das Finieren von Kompositrestaurationen. Die anatomische Form der Instrumente ermöglicht die Bearbeitung und Charakterisierung der Oberflächen verschiedenster Zähne - sowohl anterior als auch posterior.

KIT 1326 contains fine and extra-fine diamond instruments for finishing composite restorations. The anatomical shape of the burs allows the surfaces of a wide variety of teeth - both anterior and posterior - to be finished and characterized.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	018	1
	834	FG	806 314 552 524	018	1
	852	FG	806 314 199 524	016	1
	852F	FG	806 314 199 514	016	1
	649.ARK	FG	635 314 171 505	025	1


SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	820F	FG	806 314 465 514	031	1
	829F	FG	806 314 463 514	027	1
	830F	FG	806 314 257 514	016	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	863F	FG	806 314 250 514	016	1
	890F	FG	806 314 160 514	010	1
	820EF	FG	806 314 465 504	016	1
	827EF	FG	806 314 464 504	018	1
	830EF	FG	806 314 257 504	016	1
	863EF	FG	806 314 250 504	016	1





Kit 1327

CARBIDE COMPOSITE FINISHING

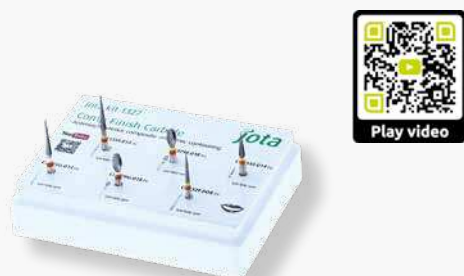

Das 1327 Comp Finish Carbide Kit enthält verschiedene Drall Finierer, mit denen man alle Oberflächen anteriorer und posteriorer Zähne problemlos finiert. Die Drall Finierer erzeugen eine überaus glatte Oberfläche auf Kompositen und anderen Füllungsmaterialien. Durch die einzigartige Schneidengeometrie entstehen deutlich feinere Oberflächenrauheiten als mit Standard Hartmetallfinierer oder ultrafeinen Diamantinstrumenten.

The 1327 Comp Finish Carbide Kit contains various drall finishers to finish all surfaces of anterior and posterior teeth with ease. These finishers create an extremely smooth surface on composites and other restorative materials. Due to the unique cutting geometry, the surface roughness is much finer than after standard carbide finishers or white diamonds.

Kit 1396

FINISHING STONE



Das Kit 1396 eignet sich zum Konturieren und Finieren von Komposit-Füllungen. Die unterschiedlichen Formen der Instrumente ermöglichen die Bearbeitung aller Oberflächen verschiedener Zähne, sowohl anterior als auch posterior.

The 1396 kit is suitable for contouring and finishing composite fillings. The different shapes of the instruments allow the processing of all surfaces of different teeth, both anterior and posterior.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	CD132F	FG	500 314 699 042	008	1
	CD134F	FG	500 314 164 042	014	1
	CD135F	FG	500 314 166 042	014	1
	CD379F	FG	500 314 277 942	018	1
	CD135U	FG	500 314 166 032	014	1
	CD379U	FG	500 314 277 932	018	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	601.ARK	RA	635 204 001 505	030	1
	645.ARK	RA	635 204 161 505	028	1
	660.ARK	RA	635 204 297 505	025	1
	661.ARK	RA	635 204 288 505	025	1
	662.ARK	RA	635 204 297 505	030	1
	666.ARK	RA	635 204 257 505	025	1
	601.GRN	RA	655 204 001 523	030	1
	645.GRN	RA	655 204 161 523	028	1
	660.GRN	RA	655 204 297 523	025	1
	661.GRN	RA	655 204 288 523	025	1
	662.GRN	RA	655 204 288 523	035	1
	666.GRN	RA	655 204 257 523	025	1

Kit 1921**PROFESSIONAL POLISHING COMPOSITE**

Sehr einfach und gleichzeitig sehr effizient. Mit nur zwei Polierern - ohne Paste oder Bürsten - können alle Oberflächen einer Komposit Füllung poliert werden.

Very simple and at the same time very efficient. With only two polishers - without paste or brushes - all surfaces of a composite filling can be polished.


Kit 1939**EXTENDED POLISHING COMPOSITE KIT**

Die Occlupol-Polierer wurden speziell für die Politur der Kauflächen der Zähne entwickelt. Die innovative Form hilft, die Vertiefung der Fissuren und die Interdentalräume und Höcker zu polieren. Das in der Zusammensetzung enthaltene Mikro-Diamantkorn lässt Komposit-Restaurationen in kurzer Zeit glänzen. Pasten und Bürsten sind zum Polieren nicht notwendig - eine Form pflegt alle Oberflächen der Kauflächen. Darüber hinaus ist es sterilisierbar und sehr langlebig.

Occlupol polishers have been developed especially for polishing the occlusal surface of teeth. The innovative shape helps to polish the deepening of the fissures and the interdental spaces and cusps. The micro-diamond grit in the composition makes composite restorations shine within a short time. Pastes and brushes are not necessary for polishing - one shape cares for all surfaces of chewing teeth. In addition, it is sterilizable and very durable.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9150	RA	652 204 546 503	140	1
	9837	RA	803 204 543 503	140	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9150	RA	652 204 546 503	140	1
	9837	RA	803 204 543 503	140	1
	9765M	RA	803 204 000 525	055	1
	9765F	RA	803 204 000 525	055	1

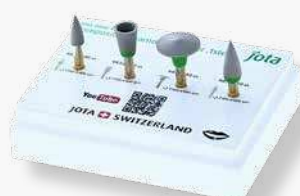Kit 1393**DIAMOND POLISHER KIT "JOTA EASY"**

Play video

Einstufige Hochleistungsdiamantpolierer für das Finieren und Hochglanzpolieren aller Komposite. „JOTA EASY“ steht für diamantdurchsetzte Polierer, die für verschiedensten Komposit-Materialien entwickelt worden sind. Das einstufige Poliersystem eignet sich hervorragend zum Glätten von Strukturen und Hochglanzpolieren.

Single-stage high-performance diamond polishers for finishing and high-gloss polishing of all composites. „JOTA EASY“ stands for diamond polishers that have been developed for a wide variety of composite materials. The single-stage polishing system is ideal for smoothing structures and high-gloss polishing.

Kit 1394**DIAMOND POLISHER KIT „JOTA PROFESSIONAL“**

Play video

Zweistufiges Diamant-Poliersystem zum Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite. Die JOTA PROFESSIONAL Diamantpolierer weisen zwei unterschiedliche Körnungen auf. Die Vorbearbeitung mit den grünen Polierer führt zu einer raschen Glättung der Strukturen, mit den grauen Polierer wird auf Hochglanz poliert. Unser Lösung für höchste Qualitätsansprüche bei Komposit-Politur.

Two-stage diamond polishing system for finishing, smoothing and high-gloss polishing of all composites. The JOTA PROFESSIONAL diamond polishers have two different grit sizes. The pre-processing with the green polishers leads to a quick smoothing of the structures, while the grey polishers are used to polish to a high gloss. Our solution for the highest quality demands in composite polishing.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9831	RA	803 204 243 502	030	1
	9832	RA	803 204 030 502	060	1
	9833	RA	803 204 304 502	100	1
	9834	RA	803 204 243 502	040	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9825	RA	803 204 243 525	030	1
	9826	RA	803 204 030 525	060	1
	9827	RA	803 204 304 525	100	1
	9828	RA	803 204 243 525	040	1
	9831	RA	803 204 243 502	030	1
	9832	RA	803 204 030 502	060	1
	9833	RA	803 204 304 502	100	1
	9834	RA	803 204 243 502	040	1

CHAIRSIDE KERAMIKBEARBEITUNG

CHAIRSIDE CERAMIC PROCESSING

Kit 1899

SILICON POLISHERS FOR COMPOSITES



Silikon Polierer wurden speziell für die Politur der Komposite entwickelt. Die Polierinstrumente zur Vor- und Hochglanzpolitur bilden ein aufeinander abgestimmtes 2-Stufen-System. Eine kostengünstige Lösung, die ein Polieren aller Zahnflächen ohne Verwendung von Polierpaste ermöglicht.

Silicone polishers were specially developed for polishing composites. The polishing instruments for pre- and high-gloss polishing form a coordinated 2-step system. A cost-effective solution that allows polishing of all tooth surfaces without the use of polishing paste.

Kit 1439

NANO CERAMIC CHAIRSIDE POLISHING



Dieses Set wurde speziell für die Politur von Nano/Hybridkeramiken und Kompositen entwickelt - die perfekte Lösung von der Anpassung der Restaurationen bis zur Hochglanzpolitur. Das zweistufige Jota Swivel Poliersystem unterstützt insbesondere die Politur von Okklusalfächen und tieferen Fissuren.

This set was specially developed for polishing nano/hybrid ceramics and composites - the perfect solution from adjusting the restorations to high-gloss polishing. The two-stage Jota Swivel polishing system especially supports the polishing of occlusal surfaces and deeper fissures.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9121M	RA	685 204 243 522	050	1
	9122M	RA	685 204 243 522	030	1
	9123M	RA	685 204 030 522	070	1
	9124M	RA	685 204 304 522	110	1
	9121F	RA	685 204 243 512	050	1
	9122F	RA	685 204 243 512	030	1
	9123F	RA	685 204 030 512	070	1
	9124F	RA	685 204 304 512	110	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	830LF	RAL	806 205 258 514	014	1
	GP662	RA	655 204 288 526	035	1
	9150	RA	652 204 546 503	140	1
	9837	RA	803 204 543 503	140	1

Kit 1395**SILICON POLISHER KIT FOR CERAMIC**

Ein 3-stufiges System aus kostengünstigen Silikonpolierern, das für die Politur aller Keramikoberflächen ausgelegt ist.

A 3-stage system of cost-effective silicone polishers designed to polish all ceramic surfaces.

Kit 1399**POLISHER Kit „3-STEP“ FOR CERAMIC**

Das Jota Polisher Kit „3 Step“ wurde speziell für die intraorale Politur von verschiedenen Keramiken entwickelt. Die Diamantpolierer dieses Systems sind in verschiedenen Formen und Körnungen von grob bis fein erhältlich und ermöglichen eine schnelle Politur aller Oberflächen von Restaurationen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist die aufeinander abgestimmte Korngrösse pro Polierstufe, damit lassen sich nach sehr kurzer Bearbeitungszeit Hochglanzergebnisse bei allen Keramiken erzielen. Eine Verwendung von Polierpaste ist nicht erforderlich.

The Jota Polisher Kit „3 Step“ was specially developed for the intraoral polishing of various ceramics. The diamond polishers of this system are available in different shapes and grit sizes from coarse to fine and enable a quick polishing of all surfaces of restorations. A major advantage of this solution is the coordinated grit size per polishing step, which allows high gloss results to be achieved on all ceramics after a very short processing time. The use of polishing paste is not necessary.


SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9133G	RA	658 204 243 524	050	1
	9134G	RA	658 204 030 524	070	1
	9133M	RA	658 204 243 514	050	1
	9134M	RA	658 204 030 514	070	1
	9133F	RA	658 204 243 504	050	1
	9134F	RA	658 204 030 504	070	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	9812G	RA	803 204 243 534	040	1
	9813G	RA	803 204 030 534	060	1
	9814G	RA	803 204 304 534	100	1
	9812M	RA	803 204 243 524	040	1
	9813M	RA	803 204 030 524	060	1
	9814M	RA	803 204 304 524	100	1
	9812F	RA	803 204 243 514	040	1
	9813F	RA	803 204 030 514	060	1
	9814F	RA	803 204 304 514	100	1

Kit 1435**JOTA LS GLOSS KIT**

Jota LS Gloss 2-Stufen-Poliersystem bietet eine Lösung für alle Oberflächen von Lithiumdisilikat Versorgungen in kürzester Zeit intraoral wieder auf Hochglanz zu polieren. Eine anschließende Glasur ist nicht mehr erforderlich.

Jota LS Gloss 2-step polishing system offers a solution for all surfaces of lithium disilicate restorations to be intraoral polished back to a high gloss in the shortest possible time. A subsequent glaze is no longer necessary.

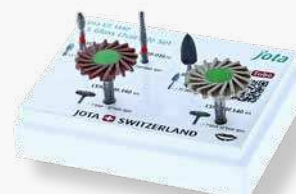Kit 1440**LS GLOSS CHAIRSIDE KIT**

Mit dem LS Gloss Chairside Kit für Korrekturen und Politur stellen wir ein sorgfältig abgestimmtes System zur Verfügung, das Instrumente für sämtliche Arbeitsabschnitte an Lithium-Disilikat Restaurationen bereitstellt. Das eigens entwickelte zweistufige Diamantpolierersortiment wird durch die bewährten Jota-Diamanten und Schleifkörper ergänzt. Mit dem LS Gloss Poliersystem wird eine perfekt-glatte und hochglänzende Oberfläche in nur zwei Politur-Schritten erzielt. Dank der Jota Swivel Technologie lassen sich auch ausgeprägte Okklusalfächen perfekt polieren.

With the LS Gloss Chairside Kit for corrections and polishing, we provide a carefully coordinated system that provides instruments for all work stages on lithium disilicate restorations. The specially developed two-stage diamond polisher range is complemented by the proven Jota diamonds and grinding instruments. A perfectly smooth and high-gloss surface is achieved in only two polishing steps with the LS Gloss polishing system. Thanks to the Jota Swivel technology, even pronounced occlusal surfaces can be polished perfectly.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	LS9871M	RA	803 204 243 522	040	1
	LS9872M	RA	803 204 030 522	060	1
	LS9871F	RA	803 204 243 512	040	1
	LS9872F	RA	803 204 030 512	060	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	850F	FG	806 314 198 514	016	1
	GP662	RA	655 204 288 526	035	1
	LS9873M	RA	803 204 543 522	140	1
	LS9873F	RA	803 204 543 512	140	1

Kit 1460**ZIR-PREP KIT**

Play video

Die JOTA Zir-Prep Diamanten mit speziellem Diamantkorn und optimierter Bindung sind auf die Bearbeitung von hochempfindlichem Zirkondioxid ausgelegt. Durch die Verwendung von mono-kristallinem Diamantkorn sind die Instrumente weniger aggressiv, sie sorgen für einen geringen Temperaturanstieg während der Präparation und halten die Rauheit der präparierten Oberflächen gering. Damit wird das Risiko von Mikro-Rissen im Zirkon signifikant reduziert.

The JOTA Zir-Prep diamonds with special diamond grit and optimized bond are designed for working on highly sensitive zirconia. By using mono-crystalline diamond grit, the instruments are less aggressive, and they ensure a low-temperature rise during preparation and keep the roughness of the prepared surfaces low. This significantly reduces the risk of micro-cracks in the zirconia.

Kit 1436**ZIR GLOSS KIT**

Play video

Mit dem Jota ZIR Gloss 2-Stufen-Poliersystem bieten wir eine Lösung an, mit der Korrekturen von Restaurationen aus Zirkondioxid in sehr kurzer Zeit wieder auf Hochglanz poliert werden. Kleinere Korrekturen an Inlays/Onlays oder Kronen finden oft Chairside statt, entsprechend wichtig sind effiziente und effektive Polierlösungen.

With the Jota ZIR Gloss 2-stage polishing system, we offer a solution that polishes corrections of zirconia restorations to a high gloss in a very short time. Smaller modifications to inlays/onlays or crowns often take place on the chairside, so efficient and effective polishing solutions are essential.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	Z801L	FG	806 314 697 324	014	1
	Z833	FG	806 314 277 324	023	1
	Z850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z863	FG	806 314 250 324	012	1
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z863F	FG	806 314 250 314	012	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	ZIR9861M	RA	803 204 243 521	040	1
	ZIR9862M	RA	803 204 030 521	060	1
	ZIR9861F	RA	803 204 243 511	040	1
	ZIR9862F	RA	803 204 030 511	060	1

Kit 1441**ZIR GLOSS CHAIRSIDE**

Mit dem Jota ZIR Gloss Chairside Kit stellen wir ein sorgfältig abgestimmtes System zur Verfügung, das Instrumente für sämtliche Arbeitsabschnitte an Zirkon-Restaurationen bereitstellt. Das eigens entwickelte zweistufige Diamantpolierer-System aus der Jota Swivel Serie wird durch die bewährten Jota-Diamanten mit spezieller Diamantkörnung für optimale Schneidleistung und Standzeit komplettiert. Die ZIR Gloss Polierer in der Swivel Ausführung sorgen für einen perfekten Hochglanz und eignen sich auch bestens zur Politur von Okklusalfächen.

With the Jota ZIR Gloss Chairside Kit, we provide a carefully coordinated system that provides instruments for all work stages on zirconium restorations. The proven Jota diamonds complete the specially developed two-stage diamond polisher system from the Jota Swivel series with special diamond grit for optimum cutting performance and service life. The ZIR Gloss polishers in the Swivel version ensure a perfect high gloss and are also ideally suited for polishing occlusal surfaces.

Kit 1453**LS- ZIR POLISHING CHAIRSIDE**

Das KIT 1453 enthält alle notwendigen Instrumente zum Konturieren, Finieren und Polieren von verschiedenen zirkon-verstärkten Lithiumsilikat Restaurationen in der Praxis. Mit Diamantinstrumenten werden Suprakontaktpunkte zu bearbeitet, okklusale und vestibuläre Oberflächen charakterisiert und die Restauration vom Block getrennt. Der grüne Diamant Stein ist für das grobe Beschleifen der Verbindungsstege vorgesehen. Der graue Zirkonflex Stein ist zur Korrektur von Supra-Kontakten (intraoral) und zum Finieren der Oberflächen gedacht. Zusätzlich enthält das Kit Vorpolyer und Hochglanzpolierer in zwei Formen - für perfekte Poliererergebnisse.

KIT 1453 contains all the necessary instruments for contouring, finishing, and polishing zirconium-reinforced lithium silicate restorations in dental practice. Diamond instruments are used to finish supra-contact points, characterize occlusal and vestibular surfaces, and separate the crown from the block. The green diamond stone is used for rough grinding of the connecting bars. The grey Glaze Prep stone is intended for correcting supra-contacts (intraoral) and finishing the surfaces. In addition, the kit contains pre-polishers and high-gloss polishers in two shapes - for perfect polishing results without polishing paste.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	GP662	RA	655 204 288 526	035	1
	ZIR9863M	RA	803 204 543 521	140	1
	ZIR9863F	RA	803 204 543 511	140	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	852F	FG	806 314 199 514	012	1
	GP662	RA	655 204 288 526	035	1
	SD661F	RA	805 204 288 514	025	1
	9812G	RA	803 204 243 534	040	1
	9814G	RA	803 204 304 534	100	1
	9812F	RA	803 204 243 514	040	1
	9814F	RA	803 204 304 514	100	1

KIEFERORTHOPÄDIE

ORTHODONTICS

Kit 1389

ORTHODONTIC KIT FG



Play video

Das ORTHODONTIC KIT FG wurde von Kieferorthopäden zusammengestellt und im klinischen Einsatz getestet und verifiziert. Das Kit beinhaltet alle erforderlichen Instrumente für das effiziente und sichere Entfernen der Klebstoffreste, ohne die Zahnschmelz zu beschädigen.

The ORTHODONTIC KIT FG has been compiled by orthodontists, tested and verified in clinical use. The kit contains all the necessary instruments for efficient and safe removal of adhesive residues without damaging the tooth structure.

Kit 1390

ORTHODONTIC KIT RA



Play video

JOTA Orthodontic Kit enthält die notwendigen Instrumente mit RA-Schaft zur effizienten und sicheren Entfernung von Kleberesten nach Brackets und anschließender Hochglanzpolitur der Zähne. Der Fräser C152 hat ein „sicheres Ende“, so dass Materialreste im zervikalen Bereich entfernt werden können, ohne das Zahnfleisch, den Zahnschmelz oder den Wurzelzement zu beschädigen.

JOTA Orthodontic Kit includes the necessary instruments with RA shaft for efficient and safe removal of adhesive residues after brackets and subsequent high-gloss polishing of the teeth. The C152 bur has a "safe end" so that material residues in the cervical area can be removed without damaging the gums, enamel, or root cement.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	C244K	FG	500 314 298 072	016	1
	C23R	FG	500 314 194 006	012	1
	C44E	FG	500 314 499 072	014	1
	C48L	FG	500 314 249 072	012	1
	C379	FG	500 314 277 072	018	1
	C379	FG	500 314 277 072	023	1
	9363	RA	635 204 297 544	034	1
	9362	RA	635 204 307 544	100	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	C48L	RA	500 204 249 072	012	1
	C23R	RA	500 204 194 006	012	1
	C152	RA	500 205 210 295	014	1
	C379	RA	500 204 277 072	018	1
	C379	RA	500 204 277 072	023	1
	9363	RA	635 204 297 544	034	1
	9362	RA	635 204 307 544	100	1
	9837	RA	803 204 543 503	110	1

SONSTIGE SETS

OTHER SETS

Kit 1367

MINIMAL PREPARATION KIT



Jota Micro Diamanten sind in einem besonders schlanken Design konzipiert und sorgen damit für ein verbessertes Sichtfeld, das insbesondere für minimalinvasive Präparationen unter Verwendung einer Lupe oder eines Mikroskops ein hochpräzises Arbeiten möglich macht. Die Mikrodiamanten zeichnen sich durch sehr gute Abtragsraten bei gleichzeitig geringem Anpressdruck aus.

Jota Micro diamonds have a remarkably slim design and thus provide an improved field of vision, making high-precision work possible, especially for minimally invasive preparations using magnifying glasses or a microscope. The micro diamonds are characterized by excellent removal rates and low contact pressure at the same time.

Kit 1331

KIDS TREATMENT SET



KIT 1331 enthält kurzschäftige Mikropräparationsinstrumente für die optimale Behandlung von kleinen Zähnen oder in engen Mundräumen. Das Kit 1331 enthält alle notwendigen Bohrer für eine sichere und unkomplizierte Kariesbehandlung an Kinderzähnen. Das Hartmetallinstrument CQ1L mit schlankem Hals und ein kleiner Swivel-Polierer unterstützen die minimalinvasive Präparation im Dentin und die abschließende Politur.

KIT 1331 contains short-shaft micro preparation instruments for optimal treatment of small teeth or in narrow oral spaces. Kit 1331 provides all the necessary burs for safe and uncomplicated caries treatment at children's teeth. The CQ1L tungsten carbide instrument with a slim neck and a small-format Swivel polisher support minimally invasive preparation in the dentin and final polishing.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	138	FG	806 314 138 524	007	1
	295	FG	806 314 295 524	007	1
	697	FG	806 314 697 524	007	1
	802	FG	806 314 002 524	009	1
	889L	FG	806 314 540 524	009	1
	C1	FG	500 314 001 001	006	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	138	FG	806 314 138 524	007	1
	833	FG	806 314 277 524	018	1
	845	FG	806 314 168 524	010	1
	801	FGS	806 313 001 524	010	1
	808	FGS	806 313 233 524	010	1
	835	FGS	806 313 108 524	010	1
	C1S	RA	500 204 001 003	021	1
	CQ1L	RA	500 204 697 003	012	1
	9123M	RA	685 204 030 522	070	1
	9837	RA	803 204 543 503	110	1

Kit 1330

ENDO ACCESS KIT

NEW
PRODUCT




Das Endo Access Kit 1330 hat den Mindestsatz an Instrumenten zur Schaffung einer endodontischen Zugungskavität durch verschiedene Restaurationsmaterialien und enthält die primären Instrumente zur Lokalisierung und Erweiterung der Kanäleingänge. Das Endo Access Kit ermöglicht eine optimale Trepanation aller Materialien und das geradlinige Anlegen einer Zugungskavität.

The Endo Access Kit 1330 has the minimum set of instruments for creating an endodontic access cavity through various restorative materials and contains the primary instruments for locating and widening the canal entrances. The Endo Access Kit allows optimal trephination of all materials and straight-line creation of an access cavity.

Kit 1999

ALL CROWN CUTTER KIT

NEW
PRODUCT

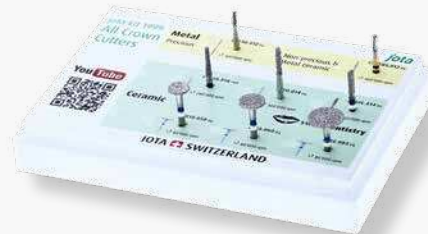


KIT 1999 enthält Kronentrenner für alle Materialien: Edel- und Nichtedelmetalle, Metallkeramik, verschiedene Keramiken und insbesondere Zirkonoxid. Die Kronentrenner für Keramik sind in kurze und lange Formen für die Bearbeitung von Front- und Seitenzähnen unterteilt. Speziell entwickelte, scheibenförmige ZIR CUT Bohrer werden zum Trennen von Vollkeramikkrone auf Okklusal- und Vestibularflächen verwendet. ACHTUNG: Verwenden Sie den scheibenförmigen ZIR CUT im supragingivalen Bereich mit der nötigen Vorsicht.

KIT 1999 contains crown cutters for all materials: precious and non-precious metals, metal ceramics, various ceramics and especially zirconium oxide. The crown separators for ceramics are divided into short and long shapes for working on the anterior and posterior teeth. Specially designed disc-shaped ZIR CUT burs are used to separate all-ceramic crowns on occlusal and vestibular surfaces. CAUTION: Use the disc-shaped ZIR CUT in the supragingival area with the necessary caution.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801	FG	806 314 001 524	010	1
	Z801L	FG	806 314 697 324	014	1
	857G	FG	806 314 220 534	014	1
	801LG	FG	806 314 697 534	016	1
	C1	FGXL	500 316 001 001	010	1
	C1S	RAL	500 205 001 003	014	1
	C18R	FG	500 314 196 008	010	1
	C152	RAL	500 205 210 295	014	1
	191RF.18MM	RA	330 206 698 001	120	1
	180GRF.19MM	RA	330 206 679 336	090	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	837D	FG	806 314 115 524	014	1
	Z818	FG	806 314 041 324	050	1
	Z818	FG	806 314 041 324	060	1
	Z818	FG	806 314 041 324	080	1
	Z838L	FG	806 314 140 526	014	1
	850SG	FGS	806 313 198 544	016	1
	CX23R	FG	500 314 194 019	012	1
	CG35RS	FG	500 314 139 006	012	1

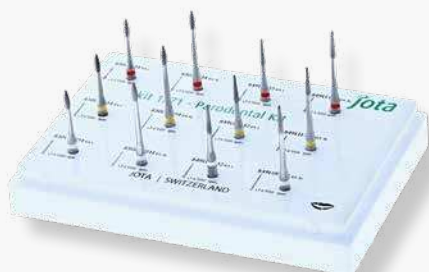
Kit 1771**JOTA PARADONTAL KIT**

Das Kit 1771 enthält speziell entwickelte Instrumente mit langem und extra langem Schaft, die eine gute Sicht und die Arbeit in tiefen parodontalen Taschen ermöglichen, die mit Küretten oder Scaler nicht erreicht werden können. Die mit feinem, extrafeinem und ultrafeinem Korn belegten Diamantinstrumente entfernen harte und weiche Zahnablagerungen und glätten die Zahn-Wurzeloberflächen.

The 1771 kit contains specially designed instruments with long and extra-long shafts that allow good visibility and work in deep periodontal pockets that cannot be reached with curettes or scalers. The diamond instruments covered with fine, extra-fine, and ultra-fine grit remove hard and soft dental deposits and smooth the tooth root surfaces.

Kit 1912**PERIIMPLANTITIS/ PARADONTITIS**

acc. PD Dr. Philipp Sahrman

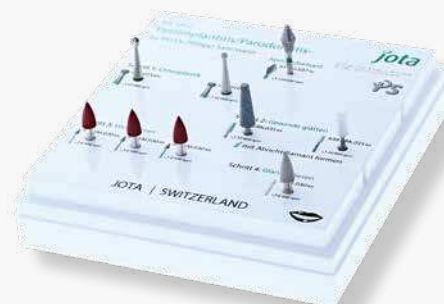

Ein professionell zusammengestelltes Sortiment, um einen nachhaltigen Erfolg bei Implantatplastiken sicherzustellen. Die in Zusammenarbeit mit PD Dr. Sahrman definierten Instrumente unterstützen eine kontrollierte Osteoplastik sowie das Glätten und Polieren von freiliegenden Titan-Implantat Strukturen. Mit diesem Set werden besonders glatte Oberflächen erzielt, Risiken für fortschreitende Periimplantitis deutlich reduziert und der Erhalt von Implantaten wird gefördert.

A professionally compiled assortment to ensure sustainable success in implantoplasty. The instruments, defined in collaboration with PD Dr. Sahrman, support controlled osteoplasty and smoothing and polishing of exposed titanium implant structures. With this set, exceptionally smooth surfaces are achieved, risks for progressive peri-implantitis are significantly reduced, and the preservation of implants is promoted.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	830LF	RAL	806 205 258 514	014	1
	830LF	RAXL	806 206 258 514	014	1
	849LF	RAL	806 205 693 514	012	1
	849LF	RAXL	806 206 693 514	012	1
	830LEF	RAL	806 205 258 504	014	1
	830LEF	RAXL	806 206 258 504	014	1
	849LEF	RAL	806 205 693 504	012	1
	849LEF	RAXL	806 206 693 504	012	1
	830LUF	RAL	806 205 258 494	014	1
	830LUF	RAXL	806 206 258 494	014	1
	849LUF	RAL	806 205 693 494	012	1
	849LUF	RAXL	806 206 693 494	012	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	811LG	FG	806 314 039 534	037	1
	C1S	RAL	500 205 001 003	016	1
	C1S	RAL	500 205 001 003	023	1
	638.ARK	RA	635 204 110 505	025	1
	652.GRN	RA	655 204 173 523	035	1
	9501M	RA	653 204 243 513	030	3
	9831	RA	803 204 243 502	030	1



Kit 1454

DEGRANULATION KIT



Kit 1454 eignet sich hervorragend für weitere Knochenregeneration Operation. Das Degranulations-Set besteht aus vier Degranulationsbohrern von 1.0 mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm. Diese Bohrer können in der Implantologie, der Parodontalchirurgie, der endodontischen Chirurgie und der Wurzelentfernung eingesetzt werden. Die sehr rauen Diamantkanten ermöglichen eine schnelle Entfernung von weichem Granulationsgewebe, das für die manuelle Behandlung unzugänglich ist. Im Vergleich zu Hartmetallfräsern beschädigen Diamantinstrumente die Knochenstruktur nicht und sind daher sicher, wenn Sie in der Nähe der anatomischen Strukturen arbeiten.

Kit1454 is excellently suitable for further bone regeneration procedures. The degranulation set consists of four degranulation drills of 1.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm. These burs can be used in implantology, periodontal surgery, endodontic surgery, and root removal. Very rough diamond edges allow fast removal of soft granulation tissue inaccessible to manual treatment. Diamond instruments do not damage bone structure compared to carbide burs; therefore safe when you work near the anatomical structures.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	801LD	RAXL	806 206 697 534	010	1
	801LD	RAXL	806 206 697 564	025	1
	801LD	RAXL	806 206 697 564	030	1
	801LD	RAXL	806 206 697 564	035	1

PROVISORISCHE RESTAURATIONEN

TEMPORARY RESTORATIONS



Kit 1833

KIT B.E.F

acc. Dr. Milko Villarroel



Dieses Kit wurde gemeinsam mit dem Opinion Leader Dr. Milko Villarroel entwickelt. Durch 3 einfache Schritte können Sie die gewünschten Ergebnisse in PMMA oder Bis-Acryl erzielen. Ein feinschneidiges Hartmetallinstrument wird verwendet, um grössere Überschüsse zu entfernen und eine ordnungsgemässe Randanpassung zu gestalten. Die superflexible Diamantscheibe ist einseitig belegt und wird zum Separieren und zum Individualisieren von Elementen verwendet. Universal Polierer und imprägnierte Bürste sind für die Vor-Politur, eine weiche Ziegenhaarbürste und eine feine Stoffscheibe sorgen zusammen mit Polierpaste für die perfekte Politur.

This kit was developed together with opinion leader Dr. Milko Villarroel. By following three simple steps, you can achieve the desired results in PMMA or Bis-Acrylic. A fine-cut tungsten carbide instrument removes more significant excesses and designs a proper margin fit. The super-flexible diamond disc is coated on one side and used to separate and customize elements. Universal polisher and impregnated brush are used for pre-polishing. A soft goat hairbrush and a fine fabric disc together with polishing paste provide the perfect polishing.

Kit 1840

PROVISIONAL ADJUSTMENT AND POLISHING



JOTA Kit 1840 wurde zur Verarbeitung und zum Polieren von Provisorien entwickelt.

JOTA Kit 1840 is designed for processing and polishing temporaries.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	CX78MF	HP	500 104 257 140	023	1
	915DF	HP	806 104 355 514	100	1
	1121	HP	090 104 543 000	210	1
	1163	HP	960 104 045 000	220	1
	1170	HP	623 104 543 533	190	1
	9108G	HP	658 900 133 533	060	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	733.PNK	HP	625 104 173 523	035	1
	9571G	HP	658 104 300 533	100	1
	9571M	HP	658 104 300 523	100	1
	9571F	HP	658 104 300 513	100	1
	1170	HP	623 104 543 533	190	1
	1121	HP	090 104 543 000	210	1

BOHRERSTÄNDER

BUR BLOCKS

BS24 FG-RA

24 x FG | 24 x RA



Dimensions (LxHxW) 80x29x25 mm

APPLICATION & HYGIENE



BS15 FG

15 x FG



Dimensions (LxHxW) 59x30x25 mm

APPLICATION & HYGIENE



PS36 - FG

36 x FG



Dimensions (LxHxW) 90x20x90 mm

BS12S FG-RA

12 x FG/RA



Dimensions (LxHxW) 60x40x45 mm

APPLICATION & HYGIENE



Materialeignung der eingesetzten Mittel beachten (ph-Wert neutral, Eignung für Al)

Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for Al)

Tenir compte de l'adéquation des matériaux des produits utilisés (valeur pH neutre, adéquation pour Al)

Es preciso tener en cuenta la idoneidad para el material del producto utilizado (valor pH neutro, adecuado para Al)

Für alle | For all

* * Vor der Reinigung muss der Boden entfernt werden. | The base must be removed prior to cleaning.

BS15 MIX

10 x FG | 5 x RA



Dimensions (LxHxW)

59x30x25 mm

APPLICATION & HYGIENE



BS48 FG-RA

24 x FG | 24 x RA



Dimensions (LxHxW)

81x51x31 mm

APPLICATION & HYGIENE



PS36 - HP

36 x RA



Dimensions (LxHxW)

90x20x90 mm

BS12S HP

12 x HP



Dimensions (LxHxW)

60x65x45 mm

APPLICATION & HYGIENE



BS24S HP

24 x HP



Dimensions (LxHxW)

120x65x45 mm

APPLICATION & HYGIENE



Unsere Leistungsnachweise

OUR PERFORMANCE RECORDS | NOS RECORDS DE PERFORMANCE |
NUESTROS REGISTROS DE RENDIMIENTO

Einer der Marktleader zu sein, bedeutet permanente Weiterentwicklung in allen Unternehmensprozessen und das Erfüllen sämtlicher regulatorischer Anforderungen.

Gesetze und Vorschriften rund um Medizinprodukte gehören zu den anspruchsvollsten weltweit. Dabei steht der Schutz der Patienten immer im Vordergrund.

Eine hohe Produktqualität ist Pflicht. Professionalität ergibt sich aus einem hohen Verständnis für die Anwendungen und der Qualifikationen der Produkte.

- › Entwicklung und Entwicklungs-Verifizierung
- › Klinische Bewertungen und Nachweise zur Biokompatibilität
- › Validierung der Prozesse
- › Chargenführung und Nachweispflichten bis zu 30 Jahren nach dem Verkauf
- › Marktüberwachung

Être l'un des leaders du marché signifie un développement constant dans tous les processus d'entreprise et le respect de toutes les exigences réglementaires.

Les lois et réglementations relatives aux dispositifs médicaux sont parmi les plus strictes au monde, l'accent étant mis sur la protection des patients.

Une qualité de produit élevée est essentielle. Le professionnalisme résulte d'un haut niveau d'appréciation des applications et de la qualification des produits.

- › Développement et vérification du développement
- › Évaluations cliniques et preuves de biocompatibilité
- › Validation des processus
- › Gestion des lots et obligations de preuve jusqu'à 30 an après la vente
- › Surveillance du marché

Ser uno de los líderes del mercado significa un desarrollo constante en todos los procesos corporativos y el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios.

Les leyes y reglamentos relativos a los dispositivos médicos se encuentran entre los más estrictos del mundo, con especial atención a la protección de los pacientes.

La alta calidad del producto es esencial. El profesionalismo resulta de un alto nivel de apreciación de las aplicaciones y de la calificación de los productos.

- › Desarrollo y verificación del desarrollo
- › Evaluaciones clínicas y pruebas de biocompatibilidad
- › Validación de procesos
- › Gestión de lotes y obligaciones de prueba hasta 30 años después de la venta
- › Vigilancia del mercado

Being one of the market leaders means constant further development in all corporate processes and compliance with all the regulatory requirements.

The laws and regulations relating to medical devices are among the most stringent worldwide, with the focus on patient protection.

High product quality is essential. Professionalism results from a high level of appreciation of the applications are from the qualification of the products.

- › Development and development verification
- › Clinical evaluations and biocompatibility evidence
- › Validation of processes
- › Batch management and proof obligations up to 30 years after the sale
- › Market surveillance

Jota-Dealer:

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der JOTA AG, Rüthi, zulässig. Es gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen“. Programm- und Konstruktionsänderungen, sowie Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von den Abbildungen und Angaben bleiben vorbehalten.

All rights reserved. Reproduction, also by extract, are only permitted with written authorization of JOTA AG, Rüthi. All offers, orders and deliveries are subject to our „General Sales and Delivery Terms“. We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown.

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est seulement permise sur autorisation écrite de JOTA AG, Rüthi. Toutes nos offres, commandes et livraisons sont soumises à nos „conditions générales de vente et de livraison.“ Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de nos produits et leur présentation autant pour différer des illustrations que des données qui sont présentées.

Todos los derechos reservados. La reproducción o extracción, son solo permitidos mediante la autorización escrita de JOTA AG, Rüthi. Todas las ofertas, ordenes y despachos se encuentran sujetas a nuestros „Términos Generales de Ventas y despachos“. Nosotros nos reservamos el derecho a modificar nuestro rango de productos y sus diseños así como para desviarse e los ejemplos y de los datos mostrados.

108002.5950.0122 - 03/2025

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschsprungstrasse 2, 9464 Rüthi
Phone +41 (0)71 767 79 99
info@jota.ch www.jota.ch  SWITZERLAND

ANWENDUNGS- UND HYGIENESYMBOLS

APPLICATION AND HYGIENE SYMBOLS SYMBOLES D'APPLICATION ET D'HYGIÈNE SÍMBOLOS DE APLICACIÓN E HIGIENE



Zahnheilkunde
Dentistry
Odontologie
Odontología



Prophylaxe
Prophylaxis
Prophylaxie
Profilaxis



Kieferorthopädie
Orthodontics
Orthodontie
Ortodoncia



Kieferchirurgie
Oral surgery
Chirurgie dentaire
Cirugía maxilofacial



Implantologie
Oral implantology
Implantologie
Implantología



Zahnbehandlung
Dental treatment
Soins dentaires
Tratamiento dental



Kavitätenpräparation
Preparation of cavities
Préparation des cavités
Preparación de cavidades



Ausbohren alter Füllungen
Removal of old fillings
Perçage d'anciennes obturations
Remoción de obturaciones viejas



Füllungsbearbeitung
Treatment of fillings
Traitement des obturations
Procesamiento de obturaciones



Kronenpräparation
Preparation of crowns
Préparation des couronnes
Preparación de coronas



Krontrennung
Cutting of crowns
Séparation des couronnes
Separación de coronas



Wurzelkanalaufbereitung
Treatment of root-canal
Traitement du canal radiculaire
Preparación de conductos radiculares



Wurzelglättung
Smoothing of tooth roots
Lissage des racines dentaires
Alisado radicular



Zahnlabor
Dental Laboratory
Labo dentaire
Laboratorio dental



Feinwerktechnik
Laboratory precision technique
Mécanique de précision dentaire
Prótesis de precisión



Modellgusstechnik
Model casting technique
Technologie des coulés sur modèle
Técnica de esqueleticos



Modellherstellung
Model casting
Fabrication des modèles
Confección de modelos



Kunststofftechnik
Acrylic technique
Technologie des résines
Técnica de acrílico



Kronen- & Brückentechnik
Crown and bridge technique
Technologie des couronnes et des bridges
Técnica de coronas y puentes



Verblend- & Keramiktechnik
Veneer and ceramic technique
Technologie de recouvrement et de la céramique
Técnica de reestimiento y cerámica



Desinfektion & Sterilisation
Disinfection & Sterilization
Désinfection & Stérilisation
Desinfección & Esterilización



Autoklav mit 135 °C
Autoclave operating at 135 °C
Autoclave avec 135 °C
Autoclave a 135 °C



Thermodesinfektor
Thermodesinfector
Thermodésinfecteur
Desinfectador térmico



Heissluftsterilisator mit 180 °C
Steriliser operating with air of 180 °C
Stérilisateur à air chaud avec 180 °C
Esterilizador de aire caliente a 180 °C



Chemiklav
Chemiclave
Chemiclave
Esterilizador químico



Ultraschall
Ultrasonics
Ultrasoun
Ultrasonido



Bohrerbad
Drill bath
Bain pour fraises
Baño para fresas



Diverse Symbole
Diverse symbols
Divers symboles
Símbolos diversos



Drehzahl
Rotation speed
Vitesse de rotation
Velocidad de giro

Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann eine Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht gewährleistet werden.

With the reuse of disposable products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be guaranteed.

En cas de la réutilisation de produits à usage unique, le risque d'infection ne peut être exclu et la sécurité de fonctionnement sans risque n'est plus assurée.

En el caso de reutilización de productos para una sola utilización hay el peligro de riesgos de infección y una seguridad funcional fuera de riesgo no está garantizada.



Anwendungsempfehlungen
Application-Guidelines
Recommandations d'utilisation
Recomendaciones de uso



Von Jota empfohlen
Recommended by Jota
Recommandé par Jota
Recomendado por Jota



Gut geeignet
Well suited
Bien adapté
Muy adecuado



Geeignet
Suitable
Adapté
Adeguado



Diamant
Diamond
Diamant
Diamante

